

CHANNEL CLEANING BRUSH

BW-18V

USA: CAUTION:
Federal law restricts this device to
sale by or on the order of a physician.

1

INTENDED USE

This instrument has been designed to be used for brushing the suction channels of OES TRANSDUODENAL CHOLEDOCHOFIBERSCOPE CHF-B20 and BRONCHOFIBERVIDEOSCOPE BF-MP190F/290F*1.
Do not use this product for any purpose other than its intended use.
*1 These products may not be available in some areas.

2

SYMBOLS

The meaning(s) of the symbol(s) shown on the back cover of this instruction manual are as follows:



Manufacturer



Authorized representative in the European Community



Importer (into European Union)

For US Customers only

For a Symbols Glossary, visit us: <http://www.olympus-global.com/en/common/pdf/symbolsglossary.pdf>

3

SIGNAL WORDS

The following signal words are used throughout this manual:

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION


Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices or potential equipment damage.

NOTE

Indicates additional helpful information.

4

INSTRUMENT NOMENCLATURE

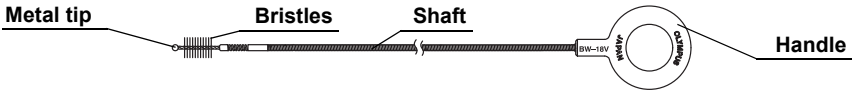

5

PREPARATION, INSPECTION AND USE

CAUTION

- Before and after use, visually inspect the exterior of the Channel Cleaning Brush for breakage etc. In particular, confirm that Metal Tip is firmly attached. Using a damaged or worn brush may damage the endoscope being cleaned.
- The Channel Cleaning Brush is a consumable item. The bristle section can be damaged, by, for example, bending or buckling. If the bristle section becomes detached and remains inside the channel, insert (for example) biopsy forceps to retrieve it. Depending on the location, the bristle section may not be recoverable. In this case, contact Olympus. If the bristle section is left unrecovered within the scope, and the scope is used in this condition, the unrecovered portion may become dislodged from the scope during the patient procedure.
- To avoid splattering of detergent solution when the Channel Cleaning Brush is pulled out, keep the endoscope away from your face.

Before brushing, read the instruction manual for the compatible endoscope being cleaned thoroughly and perform the necessary preparation and inspection. Then, use the Channel Cleaning Brush according to the instruction manual for the compatible endoscope.

6

REPROCESSING

WARNING

- Patient debris and reprocessing chemicals are hazardous. Wear protective equipment.
- With the cleaning, disinfection and sterilization methods stated in this instruction manual, prions, which are considered to be the pathogenic substance of the Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) cannot be destroyed or inactivated. When using this instrument on a patient with CJD or variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD), be sure to use this product for such patient only and/or immediately dispose of this product after use in an appropriate manner. For methods to handle CJD, please follow the respective guidelines in your country.
- This instrument is not durable, or does not have sufficient durability against the respective methods stated in the guidelines of each country for destroying or inactivating prions. For information on the durability against each method, please contact Olympus. If cleaning, disinfection and sterilization methods not stated in this instruction manual are performed, Olympus cannot guarantee the effectiveness, safety and durability of this instrument. Make sure to confirm that there is no abnormality before use, and use under responsibility of a physician. Do not use if any abnormality is found.

CAUTION

When performing ultrasonic cleaning, disinfection or sterilization, do not coil the shaft with a diameter less than 15 cm. The shaft can be damaged if coiled too tightly.

6.1

Cleaning

- Soak the Channel Cleaning Brush in a low foaming detergent solution for the amount of time and at the temperature recommended by the detergent manufacturer.
- Clean the entire brush, while it is soaking in the low foaming detergent solution, using a sponge or lint-free cloth. In particular, clean off the bristle section with your fingertips to remove adhering debris.
- Rinse with water to remove the detergent solution completely.
- Perform ultrasonic cleaning, for 5 minutes at 38 – 47 KHz.
- Rinse in water, then thoroughly dry with lint-free cloth.

CAUTION

If the brush is not thoroughly cleaned, residual organic debris may solidify and it may be difficult to effectively disinfect or sterilize the brush.

6.2

Disinfection

- After cleaning the brush in accordance with Section 6.1, “Cleaning” prepare a 2.0 – 3.2% glutaraldehyde solution. Follow the manufacturer’s instructions regarding its concentration and temperature.
- Soak the Channel Cleaning Brush in a basin filled with disinfectant solution, then remove bubbles from the outer surface, using a lint-free cloth. In particular, rub the bristle section with your fingers to remove bubbles.
- Soak in disinfectant solution for the amount of time recommended by the disinfectant manufacturer.
- Remove from the disinfectant solution, then rinse thoroughly with sterile water.
- Thoroughly dry with a sterile lint-free cloth.

NOTE

Contact Olympus for the names of specific disinfectants with which the Channel Cleaning Brush is compatible.

6.3

Sterilization

- After cleaning the brush in accordance with Section 6.1, “Cleaning”, seal the brush in packaging appropriate for steam (autoclave) sterilization according to your hospital’s protocol.
- Autoclave the brush (steam sterilization) under the following conditions. Operate the autoclave in accordance with its instruction manual.
- Utilize the autoclave drying cycle, or leave the brush in the autoclave at the conclusion of the cycle with the door ajar, to ensure that the sterile packs are dry before handling.

Sterilizer	Temperature	Exposure time
Prevacuum	132 – 134°C (270 – 274°F)	5 minutes

CAUTION

When autoclaving, make sure that the bristles are not crushed flat.

7

STORAGE

Store the Channel Cleaning Brush at a room temperature, in a dry, clean location away from direct sunlight.

CAUTION

- Do not coil the shaft with a diameter less than 15 cm. The shaft can be damaged if coiled too tightly.
- Do not store the Channel Cleaning Brush in the carrying case. Use the carrying case only for shipping the endoscope. Routinely storing the Channel Cleaning Brush in a humid, dark, non-ventilated environment such as the carrying case can present an infection control risk.

If you have any questions or comments about any information in this manual, contact Olympus.

Manufactured by



OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan
Fax: (042)646-2429 Telephone: (042)642-2111

OLYMPUS AMERICA INC.
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
Fax: (484)896-7128 Telephone: (484)896-5000

OLYMPUS KOREA CO., LTD.
(Seocho-dong, Majestat City Tower One), 2F & 3F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seoul, 06655, Republic of Korea
Fax: (02)6255-3210 Telephone: 1544-3200

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD
438B Alexandra Road #03-07/12, Alexandra Technopark Bld B, Singapore 119968
Fax: 6834-2438 Telephone: 6834-0010

Distributed by



OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 20, 20097 Hamburg, Germany
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Fax: (040)23773-4656 Telephone: (040)23773-0

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
5301 Blue Lagoon Drive, Suite 290 Miami, FL 33126-2097, U.S.A.
Fax: (305)261-4421 Telephone: (305)266-2332

OLYMPUS (BEIJING) SALES & SERVICE CO., LTD.
A8F, Ping An International Financial Center, No. 1-3, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing, 100027 P.R.C.
Fax: (86)10-5976-1299 Telephone: (86)10-5819-9000

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD
3 Acacia Place, Notting Hill, VIC 3168, Australia
Fax: (03)9543-1350 Telephone: (03)9265-5400

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, United Kingdom
Fax: (01702)465677 Telephone: (01702)616333

OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
Elektrozavodskaya str. 27 bld 8, 107023 Moscow, Russia
Fax: (7)495-926-7072 Telephone: (7)495-926-7077

チャンネル掃除用ブラシ
BW-18V

1 使用目的

本製品は、OES胆道ファイバースコープCHF-B20、気管支ファイバービデオスコープBF-MP290Fと組み合わせて吸引管路をブラッシングすることを目的としています。この目的以外には使用しないでください。

2 警告表示

本取扱説明書の中では、以下の警告表示を使用しています。

警告

それを守らないと死亡、または重傷につながる可能性のある事柄を示しています。


注意

それを守らないと中程度以下の傷害、または機器の損傷につながる可能性のある事柄を示しています。

参考

使用にあたっての有効な知識、情報などの内容を示しています。

3 各部の名称

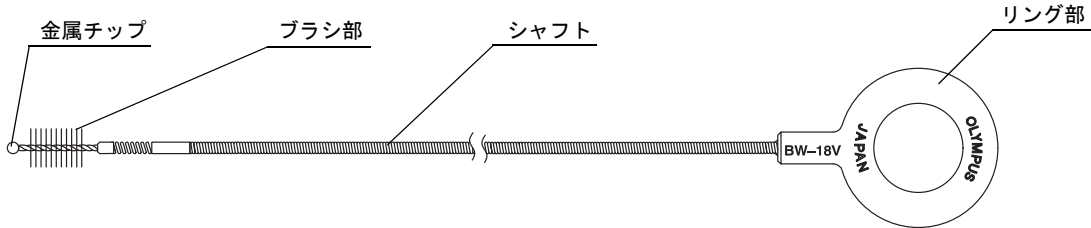

4 準備と点検／使用方法

- 注意
- 使用前および使用後に必ずチャンネル掃除用ブラシ全体をよく見て異常がないことを確認してください。特に金属チップがはずれていないかチェックしてください。壊れたチャンネル掃除用ブラシを使用すると、機器の破損の原因となります。
 - チャンネル掃除用ブラシは消耗品であり、曲げ、座屈などによりブラシ部が破損してしまうことがあります。ブラシ部がはずれて管路内に残っている可能性がある場合は、鉗子などを挿入して残っていないか十分チェックしてください。残ったまま内視鏡を使用すると、症例中にブラシ部が脱落する可能性があります。ただし、残った場所によっては発見できない場合がありますので、見つからない場合は最寄りの当社サービスセンターまたは当社支店、営業所にご連絡ください。
 - チャンネル掃除用ブラシの引き抜きによるシリンダ開口部からの汚物の飛沫を避けるため、なるべく内視鏡から顔を離してブラッシングしてください。

チャンネル掃除用ブラシは、洗浄／消毒（または滅菌）したものを準備します。

ブラッシング前に上記適応内視鏡の取扱説明書を熟読し、準備と点検を行ない、上記適応内視鏡の取扱説明書に沿って使用します。

5 チャンネル掃除用ブラシの洗浄／消毒／滅菌方法

- 警告
- 感染防止上、皮膚の保護上、必ず防護メガネ／フェイスマスク、防水性の保護服またはガウン、滅菌手袋などの保護具を使用してください。
 - 本取扱説明書に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質と言われているプリオンを消失または不活化することはできません。クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で廃棄してください。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインに従ってください。
 - 本製品は、種々のガイドラインで示されている、プリオンを消失または不活化する方法に対する耐久性がまったくありません。あるいは、十分な耐久性がありません。各方法に対する耐久性は、お近くの当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所までお問い合わせください。本取扱説明書に記載されていない方法で洗浄、消毒、滅菌を行った場合、当社は本製品の有効性、安全性、耐久性を保証できません。使用前に異常がないか十分に確認したうえで、医師の責任で使用してください。異常がある場合は使用しないでください。

- 注意
- 超音波洗浄、消毒、滅菌するときには、シャフトを直径15cm以下に丸めないでください。シャフトの巻き癖の原因となる場合があります。

5.1 洗浄

- 低泡性洗浄液にチャンネル掃除用ブラシを浸漬します。洗浄液の温度、浸漬時間については洗浄液の取扱説明書に従ってください。
- 低泡性洗浄液中で、スポンジまたはガーゼを用いて全体を洗浄します。特にブラシ部に付着した血液などは指でつまみ洗いし十分に洗浄除去します。
- 水洗いを行い、洗浄液をきれいに洗い流します。
- 超音波洗浄を行います。（処理条件：38～47KHz、5分間）
- 水洗いを行い、水分はガーゼでふき取ります。

- 参考
- 粘液、血液が残っていると、消毒液浸漬、オートクレーブにより固化してしまう場合があります。

5.2 消毒

- 「5.1 洗浄」に沿って洗浄後、2～3.2%のグルタール製剤を用意します。消毒液の濃度と温度は、消毒液の取扱説明書に従ってください。
- 消毒液の入ったバットなどにチャンネル掃除用ブラシを浸漬し、外表面の気泡をガーゼなどを用いて除去します。特にブラシ部は指でつまみ洗いして、気泡を除去してください。
- 消毒液の取扱説明書に記載されている浸漬時間に従って、消毒液に浸漬します。
- 消毒液から引き上げ、滅菌水で十分にリンスします。
- 清潔なガーゼなどで水分をふき取ります。

- 参考
- 消毒液によりチャンネル掃除用ブラシを消毒する場合は、その薬品メーカーに対象となる病原菌に関する消毒効果を確認してください。
 - 本製品の耐性が確認されている消毒液の具体的製品名は、最寄りの当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所までお問い合わせください。

5.3 滅菌

- 「5.1 洗浄」に沿って洗浄後、シャフトを丸めてチャンネル掃除用ブラシを滅菌パックに入れ、密封します。
- チャンネル掃除用ブラシを密封した滅菌パックをオートクレーブ装置に入れた後、下記条件に従ってオートクレーブ（高圧蒸気滅菌）をします。オートクレーブ装置の操作は、装置の取扱説明書あるいは製造メーカーの指示に従ってください。

排気方式	温度	作用時間
強制排気方式	132～134℃	5分間

- 注意
- オートクレーブをする場合は、ブラシ部の毛がつぶれないようにしてください。
 - 132℃、60分の高圧蒸気滅菌に対する耐久性は保証していません。本条件で滅菌を行うと、部品の劣化によって、部品破壊などの異常が発生するおそれがあります。本条件で高圧蒸気滅菌してから使用する場合は、使用前に異常がないか十分に確認したうえで、医師の責任で使用してください。異常がある場合は使用しないでください。

6 保管

常温、常湿でかつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管します。

- 注意
- シャフトを直径15cm以下に丸めないでください。シャフトの巻き癖の原因となる場合があります。
 - チャンネル掃除用ブラシはキャリングケース内に保管しないでください。キャリングケースは内視鏡の運搬時にだけ使用してください。キャリングケースを日常の保管の手段として使っていると菌の繁殖を促進するおそれがあります。

本製品の内容について不明な点がある場合は、最寄りの当社指定のサービスセンター、または当社営業所にお問い合わせください。

オリンパス メディカル システムズ株式会社

 Olympus Customer Information Center Endoscope
内視鏡お客様相談センター 0120-41-7149